
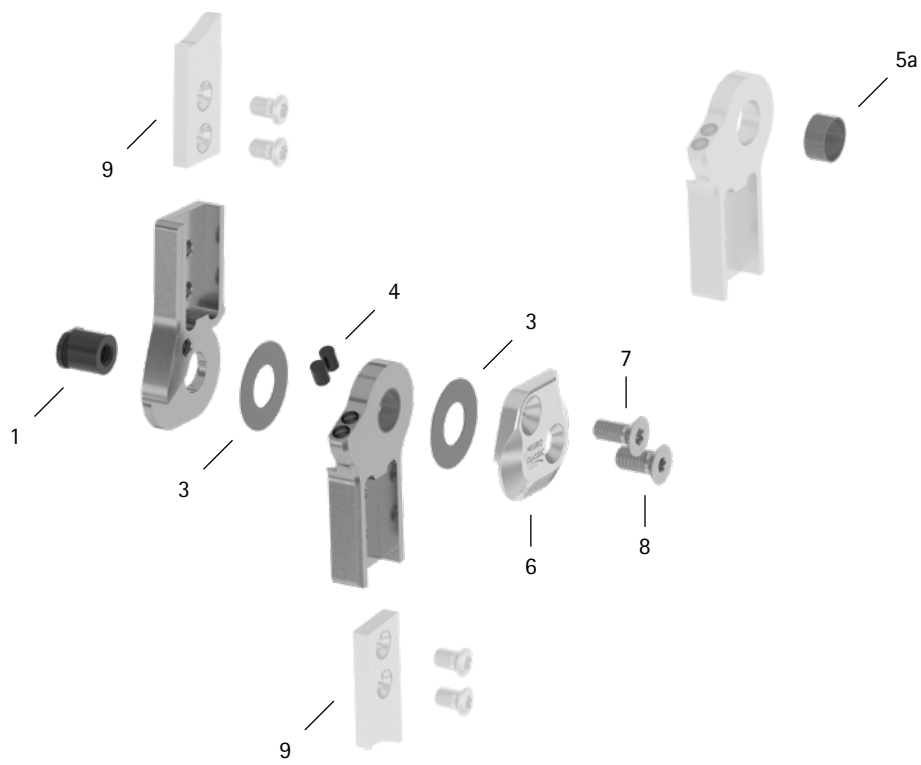


Commissione del paziente/ID della configurazione \_\_\_\_\_

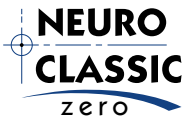

| Pos.                                  | 20 mm              | Descrizione                                                         | Possibile problema | Misura     | Controllo raccomandato, event. sostituzione* | Sostituzione successiva dopo |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Articolazione modulare                |                    |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 1                                     | SB1069-L1020       | dado testa ovale                                                    | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 3                                     | GS2611-040         | dischetto di slittamento, Ø = 26 mm                                 | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 3                                     | GS2611-045         |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 3                                     | GS2611-050         |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 3                                     | GS2611-055         |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 3                                     | GS2611-060         |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 4                                     | PN1000-L05/5       | ammortizzatore dell'arresto di estensione                           | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 5a                                    | BP1211-L060        | boccola scorrevole                                                  | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 18 mesi                      |
| 6                                     | SJ0155-L/AL        | piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 6                                     | SJ0155-R/AL        | piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio |                    |            |                                              |                              |
| 7                                     | SC1405-L14         | vite a testa svasata con cava esalobata                             | usura              | sostituire | ogni 6 mesi                                  | 36 mesi                      |
| 8                                     | SC1406-L14         | vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)            |                    |            |                                              |                              |
| Ancoraggi modulari e stecche modulari |                    |                                                                     |                    |            |                                              |                              |
| 9                                     | vedere il catalogo | ancoraggi modulari e stecche modulari                               | usura o rottura    | sostituire | ogni 6 mesi                                  | secondo necessità            |

\* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente