


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

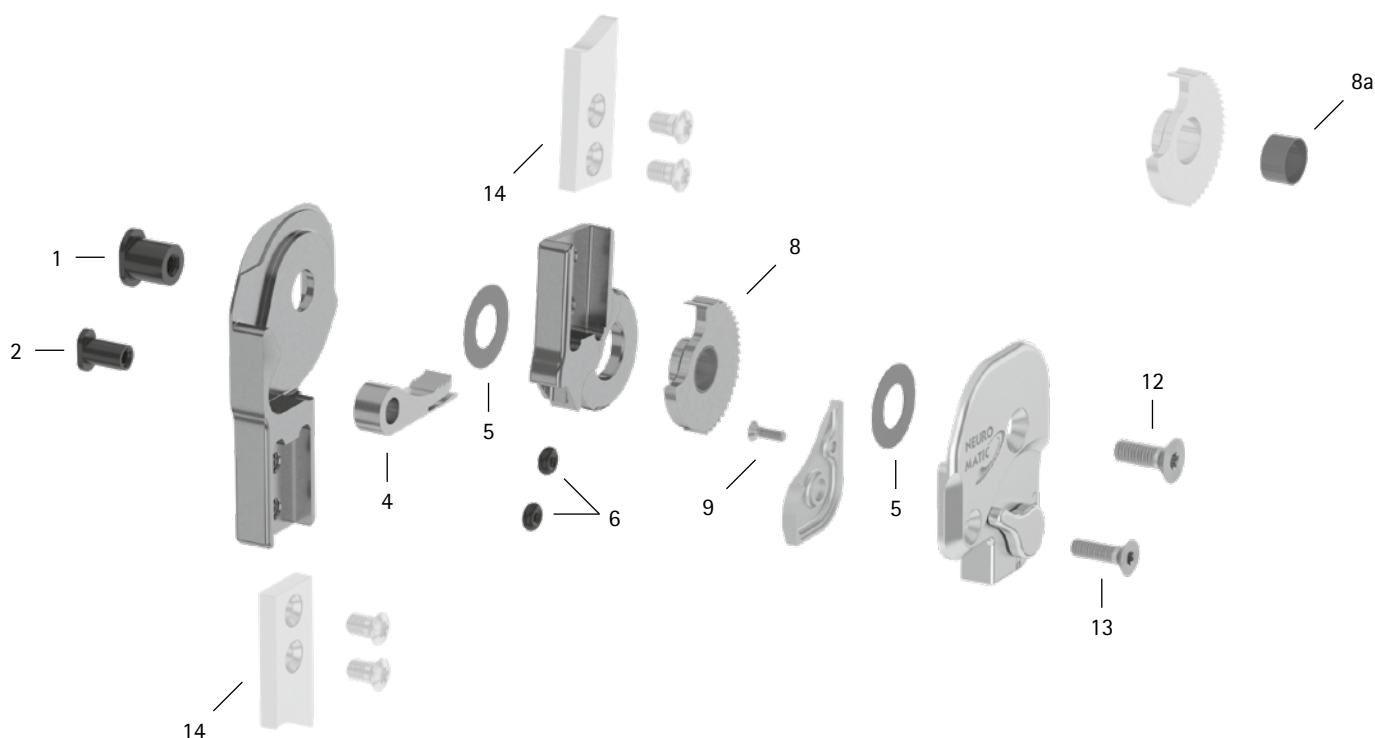

Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB9669-L0990	dado testa ovale (asse dell'articolazione)	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
2	SB6049-L0990	dado testa ovale (nottolino di arresto)				
4	SK0373	nottolino di arresto	usura dei denti	sostituire	ogni 3 mesi	12 mesi con un livello di attività 1 e 2 9 mesi con un livello di attività 3 6 mesi con un livello di attività 4
5	GS1910-040	dischetto di slittamento, Ø = 19 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5	GS1910-045					
5	GS1910-050					
5	GS1910-055					
5	GS1910-060					
6	VE3771-D/012/26	set per O-ring ammortizzatori	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
8	SK0363-2L	corona dentata con boccia scorrevole, sinistra laterale o destra mediale, titanio	usura dei denti	sostituire	ogni 3 mesi	12 mesi con un livello di attività 1 e 2 9 mesi con un livello di attività 3 6 mesi con un livello di attività 4
8	SK0363-2R	corona dentata con boccia scorrevole, sinistra mediale o destra laterale, titanio				
8a	BP1110-L059	boccia scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	SC1403-L08/1	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
12	SC1405-L14	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
13	SC1404-L14	vite a testa svasata con cava esalobata**				
9-13	SK3383-L	unità funzionale, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
9-13	SK3383-R	unità funzionale, sinistra mediale o destra laterale***				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
14	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente

WP0110-IT-2025-01