


Commissione del paziente/ID della configurazione _____



Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB1069-L1060	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	GS2311-040	dischetto di slittamento, Ø = 23 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	VE3771-012/26	O-ring ammortizzatore	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5a	BP1211-L055	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SL0253-L/AL	piastra di copertura, sinistra lat. o destra med., alluminio**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SL0253-R/AL	piastra di copertura, sinistra med. o destra lat., alluminio**				
7a	VE3771-09/15	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
7c	VE3771-04/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**			ogni 6 mesi	18 mesi
9	PN0005-L02	ammortizzatore dell'arresto**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11	SL0283-05	arresto di estensione**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
12	SC1405-L14	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
13	SC1406-L14	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
6-13	SL2953-L	unità funzionale modularità plug + go, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6-13	SL2953-R	unità funzionale modularità plug + go, sinistra mediale o destra laterale***				

Commissione del paziente/ID della configurazione _____

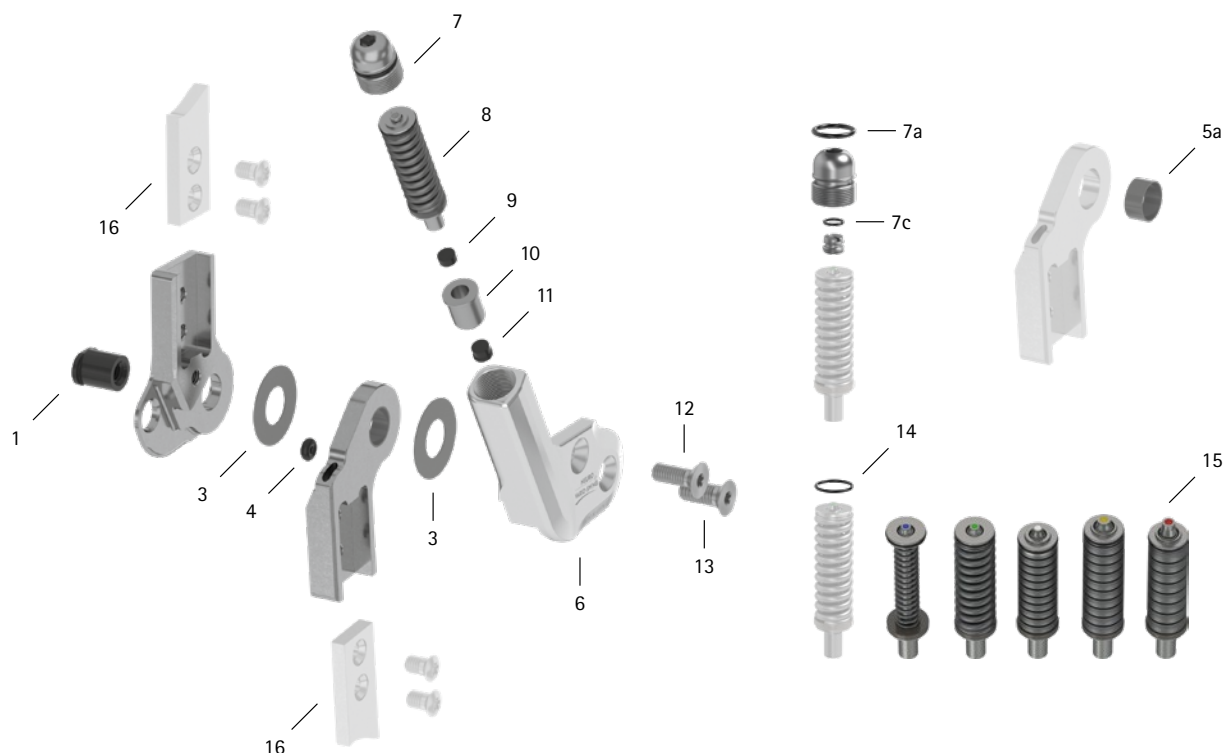

Pos.	16 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Unità elastiche						
14	VE3771-07/10	O-ring per fissare l'unità elastica**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
15	SH5802-15/05	unità elastica, blu, normale, libertà di movimento max. 9***	usura spostamento delle molle a tazza rumori dell'unità elastica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
15	SH5802-15/11	unità elastica, verde, media, libertà di movimento max. 9***		riallineare le molle a tazza con una pinza		
15	SH5802-09/16	unità elastica, bianca, forte, libertà di movimento max. 6***		lubrificare l'unità elastica con olio lubrificante (codice art. FT3000-15)		
15	SH5802-10/29	unità elastica, gialla, molto forte, libertà di movimento max. 6***				
15	SH5802-05/53	unità elastica, rossa, ultra forte, libertà di movimento max. 3***				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
16	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente