


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

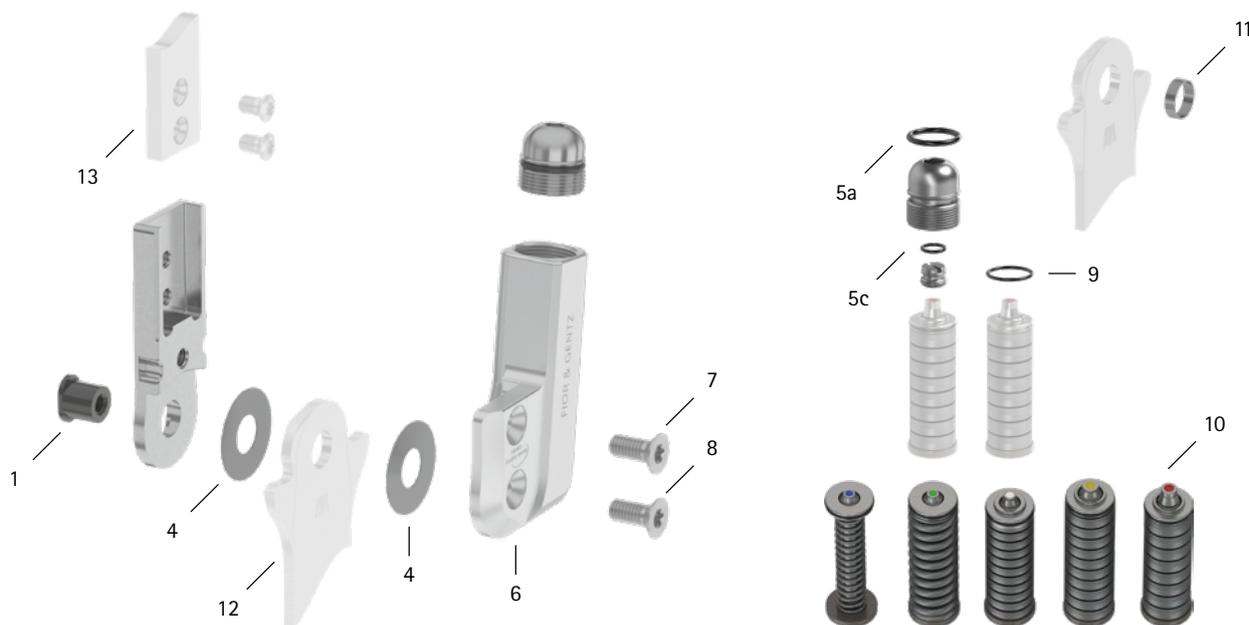

Pos.	20 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare senza linguette di aggiustamento						
1	SB1069-L0960	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
4	GS2611-040	dischetto di slittamento, Ø = 26 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5a	VE3771-125/15	O-ring per fissare la vite di regolazione della struttura**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5c	VE3771-07/10	O-ring per fissare la vite di limitazione del movimento**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SH0365-3L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SH0365-3R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
7	SC1416-L14	vite a testa svasata con cava esalobata**	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	SC1416-L14	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)**				
5-8	SH3985-L/AL	unità funzionale, sinistra laterale o destra mediale***	perdita di funzione, usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
5-8	SH3985-R/AL	unità funzionale, sinistra mediale o destra laterale***				
Unità elastiche						
9	VE3771-11/10	O-ring per fissare l'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	SF5805-15/18	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
10	SF5805-15/25	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°				
10	SF5805-10/40	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°	rumori dell'unità elastica	riallineare le molle a tazza con una pinza	ogni 6 mesi	18 mesi
10	SF5805-10/60	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°				
10	SF5805-05/99	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
11	BR1211-L030	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
12	vedere il catalogo	staffe per piede modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
13	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

** parte integrante dell'unità funzionale

*** componenti modulari contenuti sostituibili anche separatamente

WP0058-IT-2024-12