


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

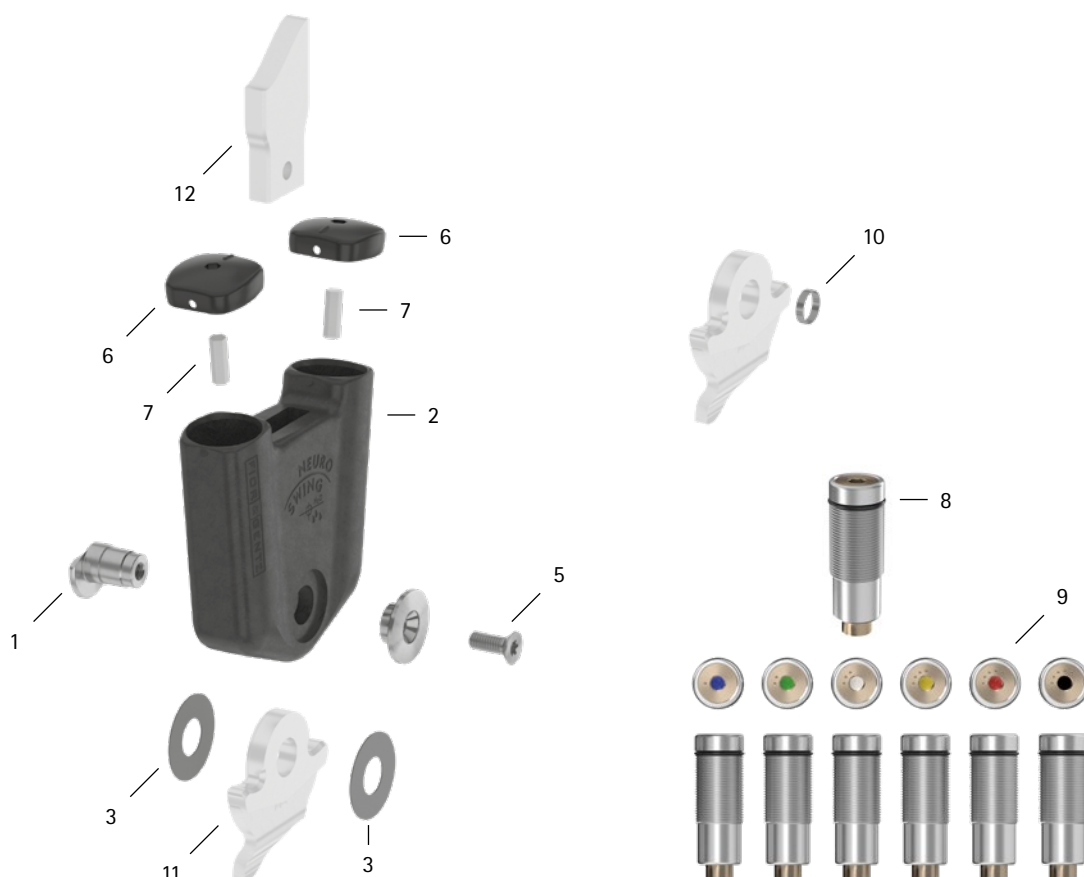

Pos.	24 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SF0597-C/1	dado testa ovale	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
2	SF0507-C	alloggiamento dell'articolazione	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
3	GS3013-040	dischetto di slittamento, Ø = 30 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS3013-045					
3	GS3013-050					
3	GS3013-055					
3	GS3013-060					
5	SC1416-L16	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SF0597-C/4/1	copertura dell'unità elastica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
7	SF0597-C/4/0	perno esagonale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
Unità elastiche e battuta dorsale statica						
8	VE3771-180/15	O-ring per fissare l'unità elastica e la battuta dorsale statica	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	SF5807-C/15/12	unità elastica, blu, normale, mobilità max. 15°	usura rumori dell'unità elastica/della battuta dorsale statica	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
9	SF5807-C/15/25	unità elastica, verde, media, mobilità max. 15°				
9	SF5807-C/10/53	unità elastica, bianca, forte, mobilità max. 10°				
9	SF5807-C/10/80	unità elastica, gialla, molto forte, mobilità max. 10°				
9	SF5807-C/05/99	unità elastica, rossa, ultra forte, mobilità max. 5°				
9	SF5807-C/0	battuta dorsale statica, nera, mobilità 0°				
Staffa per piede modulare, ancoraggio modulare e stecca modulare						
10	BR1413-L070	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
11	vedere il catalogo	staffa per piede modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	48 mesi
12	vedere il catalogo	ancoraggio modulare e stecca modulare	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità
-	-	collegamento tramite colla (stecca/l'ancoraggio modulare e articolazione modulare)	rottura	incollare nuovo componente modulare in carbonio	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione di prodotti su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

WP0130-IT-2026-09