

## Conversione da NEURO SWING 2 a NEURO HiSWING

Questo tutorial online descrive la conversione di un'articolazione tibiotarsica modulare con modularità plug + go in un'articolazione tibiotarsica modulare NEURO HiSWING con modularità plug + go, utilizzando l'esempio della NEURO SWING 2. Tutte le articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go, per via della loro costruzione, possono essere convertite tra di loro sostituendo l'unità funzionale. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nel [tutorial online](#) sul montaggio delle "articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go".

Ulteriori informazioni relative alle articolazioni tibiotarsiche modulari sono disponibili nelle [istruzioni per l'uso](#) corrispondenti.

### FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com



**FIOR & GENTZ**


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com



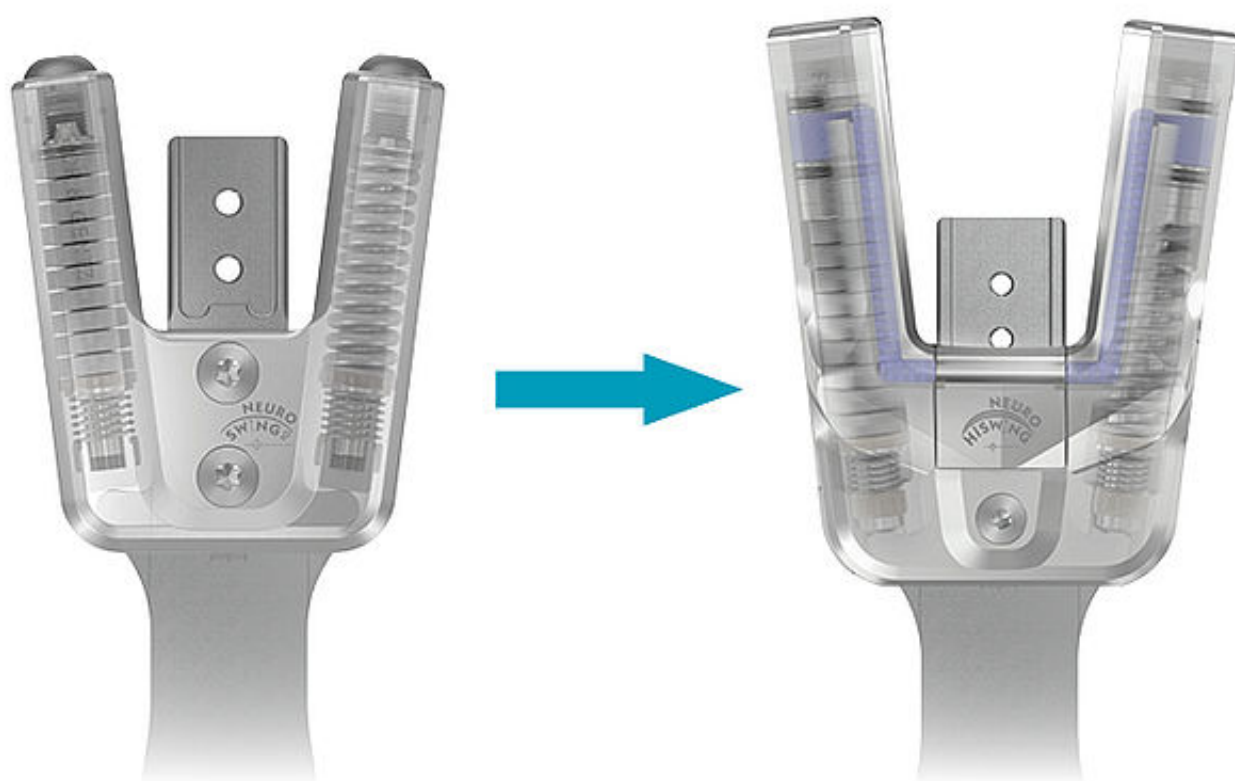

È possibile convertire la NEURO SWING 2 e tutte le articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go in pochi passaggi in un'articolazione tibiotarsica modulare NEURO HiSWING. L'articolazione tibiotarsica modulare NEURO HiSWING offre possibilità di regolazione individuali dell'angolo dell'articolazione tibiotarsica.

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com

**FIOR & GENTZ**  
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



A tal fine occorre:

- l'unità funzionale NEURO HiSWING nella larghezza modulare corrispondente,
- una livella,
- una chiave/inserto per viti con cava esalobata T6.

**FIOR & GENTZ**


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com



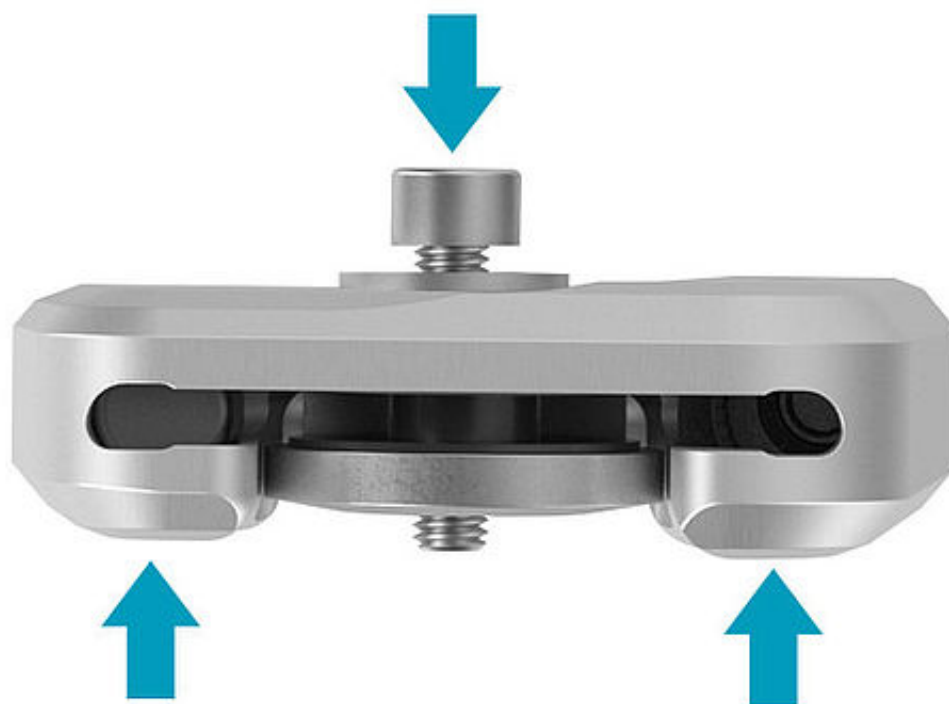

Smontare l'articolazione modulare iniziale:

- svitare entrambe le viti a testa svasata dalla piastra di copertura;
- posizionare la rondella sulla piastra di copertura e avvitare la vite di pressione nella filettatura della prima non completamente;
- separare la parte superiore dell'articolazione e la piastra di copertura esercitando una forza su entrambe come illustrato (vedere le frecce). È possibile fare ciò utilizzando una morsa da banco o mediante colpi controllati.
- Rimuovere la vite di pressione e la rondella.



Pulire le superfici da incollare. Mescolare una piccola quantità di AGOMET® F330 per incollare la livella nell'incavo formato dalla dima. Lasciare indurire a sufficienza la colla.

*Nota: osservare la [scheda dei dati di sicurezza](#) quando si utilizza AGOMET® F330.*

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com

**FIOR & GENTZ**  
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com



**FIOR & GENTZ**


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com



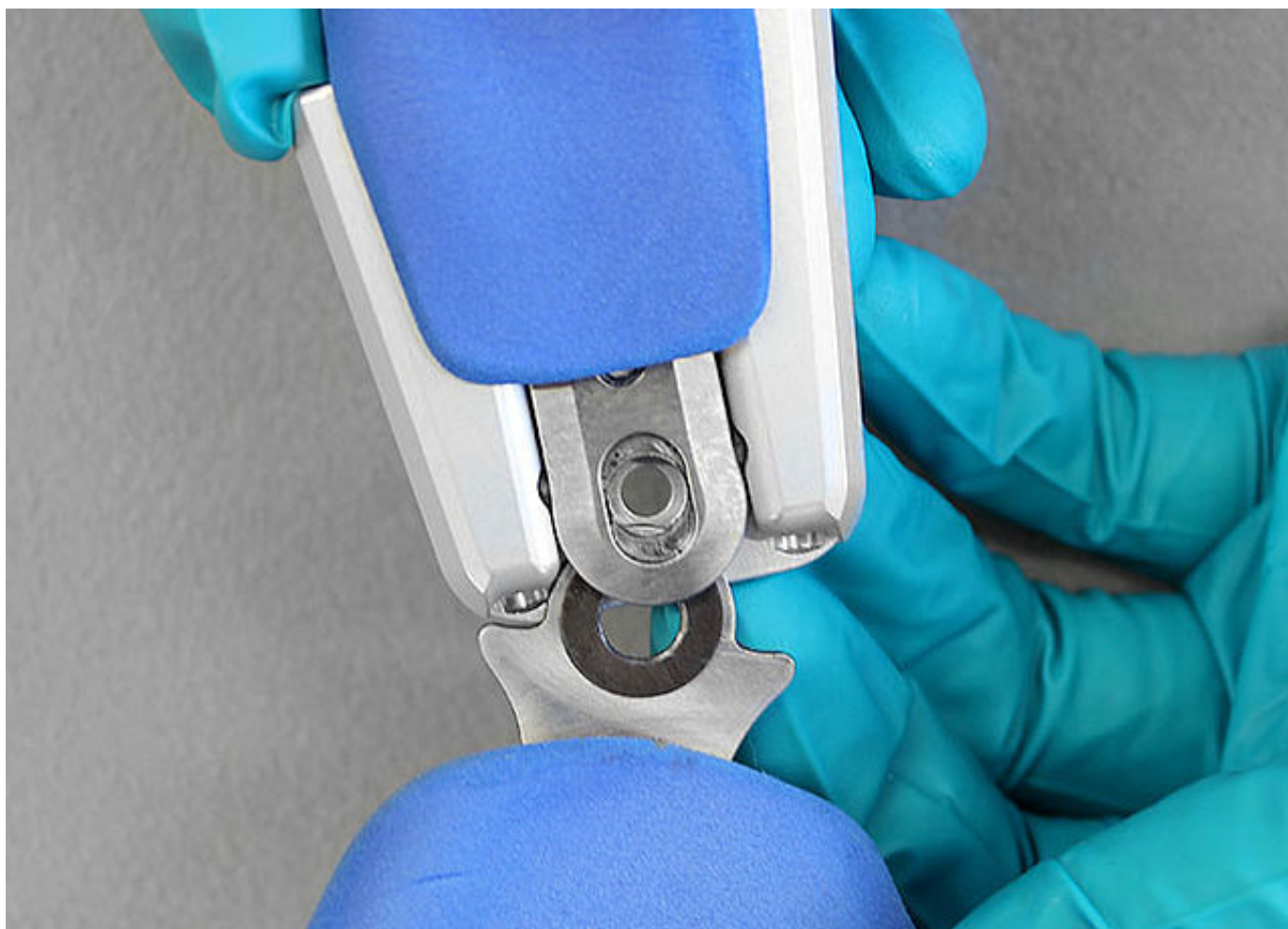

Seguire le fasi di lavoro nel tutorial online [Montaggio dell'articolazione NEURO HiSWING](#).

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com



**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.com

