

Articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go

La nostra gamma di prodotti comprende le seguenti articolazioni tibiotarsiche modulari contrassegnate dall'icona plug + go:

- NEURO CLASSIC
- NEURO HiSWING
- NEURO SWING
- NEURO SWING-CLASSIC
- NEURO SWING 2
- NEURO VARIO-CLASSIC 2
- NEURO VARIO-SPRING 2
- NEURO VARIO SWING
- NEURO VARIO 2

Grazie alla loro modularità, queste articolazioni modulari possono essere convertite rapidamente e facilmente da un'articolazione modulare all'altra sostituendo solo alcuni componenti del sistema. Nel presente tutorial online illustriamo le fasi di lavoro necessarie per la conversione.

I componenti modulari per la conversione delle articolazioni modulari sono disponibili nelle [pagine del catalogo](#) delle rispettive articolazioni modulari.

Le indicazioni sul montaggio e le possibilità di regolazione delle articolazioni modulari sono disponibili nelle rispettive [istruzioni per l'uso](#) e nei tutorial online nella sezione dedicata al montaggio delle articolazioni.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com





Tutte le articolazioni modulari con-trasseginate dall'icona plug + go pos-sono essere convertite sostituendo le unità funzionali (ed eventualmente le unità elastiche) ed eventualmente montando una livella, se necessario.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com






Per tutte le articolazioni tibiotarsiche modulari vengono impiegate le stesse parti superiori dell'articolazione e le stesse staffe per piede modulari.

Queste articolazioni modulari sono rispettivamente contrassegnate con l'icona plug + go.



Altre articolazioni tibiotarsiche modulari sono modulari solo in misura limitata e quindi non sono contrassegnate dall'icona.

Tuttavia, è possibile utilizzare successivamente queste articolazioni modulari con la modularità plug + go mediante la levigatura della staffa per piede modulare.

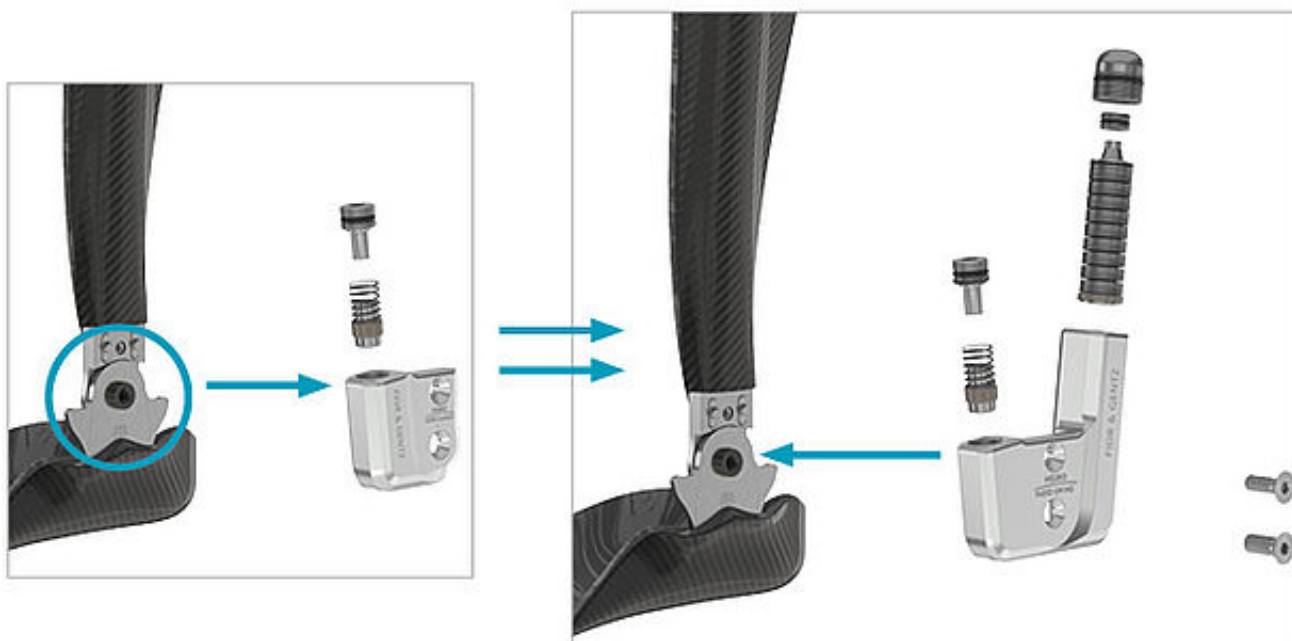

Quando si convertono le articolazioni modulari, c'è sempre un'articolazione modulare iniziale (qui una NEURO VARIO-CLASSIC 2) e un'articolazione modulare finale (qui una NEURO VARIO-SWING).

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM




Selezionare l'articolazione modulare finale in base alle proprietà che si desidera modificare:

- Forza elastica
- Entità del movimento in estensione dorsale
- Entità del movimento in fles-sione plantare
- Opzioni di regolazione
- Attenuazione dei rumori
- Assorbimento degli urti integrato

Per qualsiasi domanda, contattare il servizio di assistenza tecnica.

Nota: le battute dorsali e plantari statiche possono essere realizzate solo con le articolazioni modulari utilizzando le unità elastiche o le viti di regolazione. La staffa per piede mo-dulare di per sé può essere mossa liberamente in estensione dorsale e in flessione plantare.

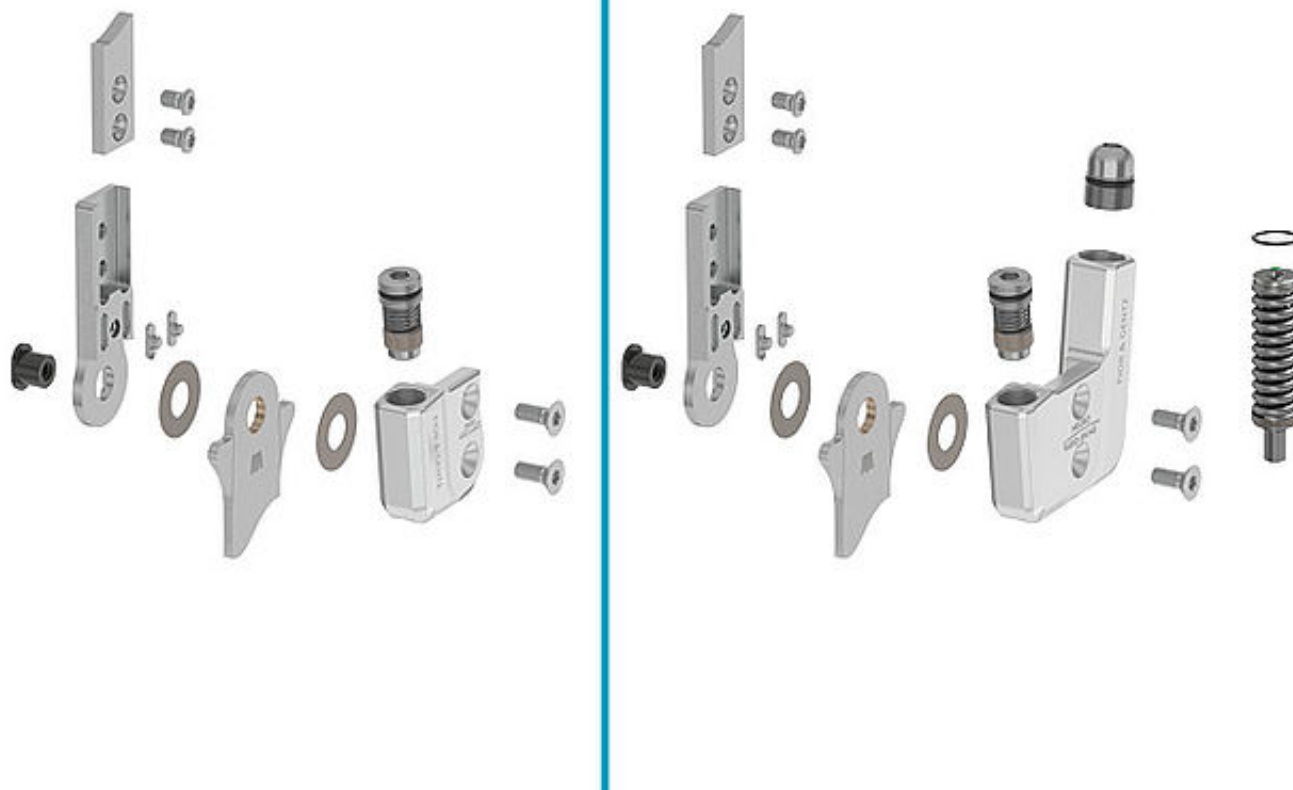

Per la conversione, confrontare i componenti modulari delle rispettive articolazioni modulari sulle pagine del nostro catalogo dei prodotti.

Aprire le tabelle dei pezzi di ricambio:


- dell'articolazione modulare iniziale (qui un NEURO VARIO-CLASSIC 2) e
- dell'articolazione modulare finale (qui un NEURO VARIO-SWING).

Determinare la rispettiva unità funzionale e ordinarla.

Importante!

Se l'articolazione modulare finale è dotata di unità elastiche, queste so-no riportate nelle tabelle separate nel catalogo.

Se l'articolazione modulare finale è un NEURO HiSWING, è necessaria una livella.

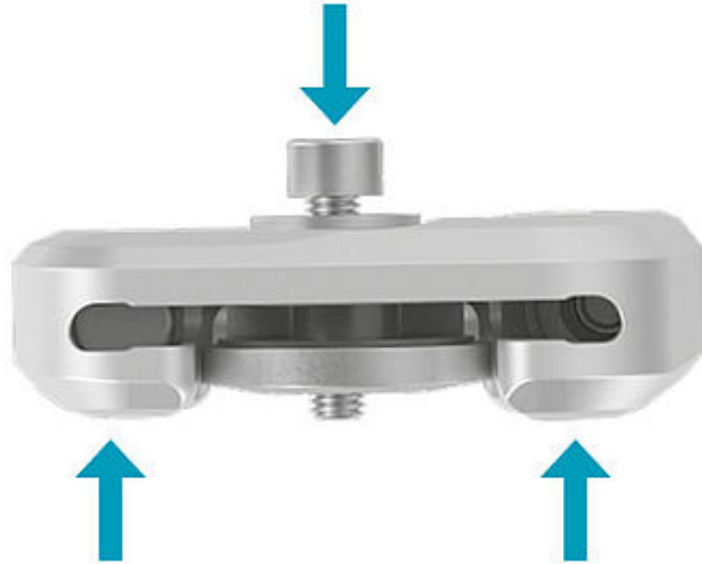

Smontare l'articolazione modulare iniziale:

- Svitare entrambe le viti a testa svasata dalla piastra di copertura.
- Posizionare la rondella sulla piastra di copertura e avvitare la vite di pressione, non completamente, nella filettatura della prima vite.
- Separare la parte superiore dell'articolazione e la piastra di copertura esercitando una forza su entrambe (vedere frecce). È possibile fare ciò utilizzando una morsa da banco o mediante colpi controllati.
- Rimuovere la vite di pressione e la rondella.

Nota: una piastra di copertura NEURO CLASSIC può essere già smontata svitando le viti a testa svasata senza danneggiare le linguette di aggiustamento con perno o i fori della piastra.



A ogni manutenzione controllare lo stato di usura o altri danneggiamenti di tutti i componenti modulari e, all'occorrenza, sostituirli.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



Montare l'articolazione modulare rispettando le indicazioni del [montaggio della rispettiva articolazione](#).

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com



FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

