

Manutenzione di NEURO FLEX MAX, NEURO LOCK, NEURO LOCK MAX

Nel presente tutorial online illustriamo la manutenzione delle nostre articolazioni per ginocchio modulari con blocco movimento:

- NEURO FLEX MAX
- NEURO LOCK
- NEURO LOCK MAX

Ogni sei mesi è necessario verificare lo stato di usura e la funzionalità dei componenti modulari. Sull'esempio della NEURO FLEX MAX con funzione di blocco, forniamo qui una panoramica dettagliata delle fasi di lavoro da eseguire per ciascun intervento di manutenzione.

Ulteriori informazioni relative alla rispettiva articolazione modulare sono disponibili nelle [istruzioni per l'uso](#).

Inoltre, alla voce "Montaggio dell'articolazione", sono disponibili i tutorial online relativi alla rispettiva articolazione per ginocchio modulare bloccata.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com



FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com



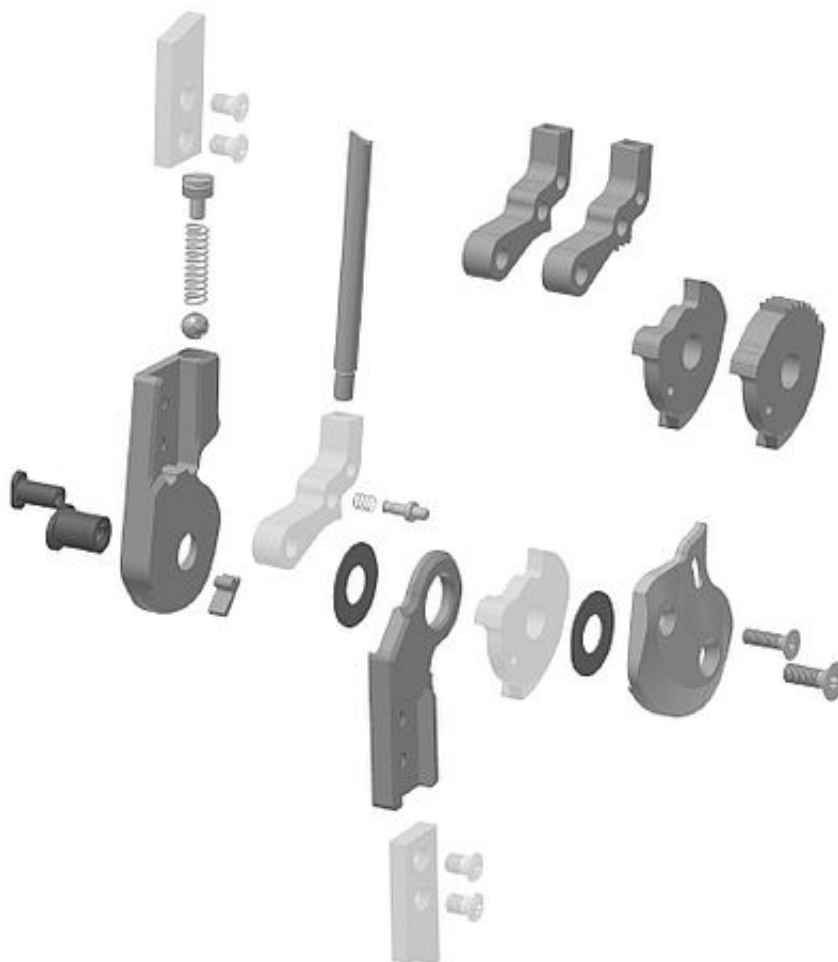

Nelle istruzioni per l'uso, alla voce "Manutenzione" sono riportate le informazioni relative ai componenti modulari che necessitano di una verifica particolarmente accurata durante un intervento di manutenzione.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com





Controllare che la funzione di blocco funzioni senza gioco. In presenza di gioco, sono necessari nuovi componenti di blocco.

FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com



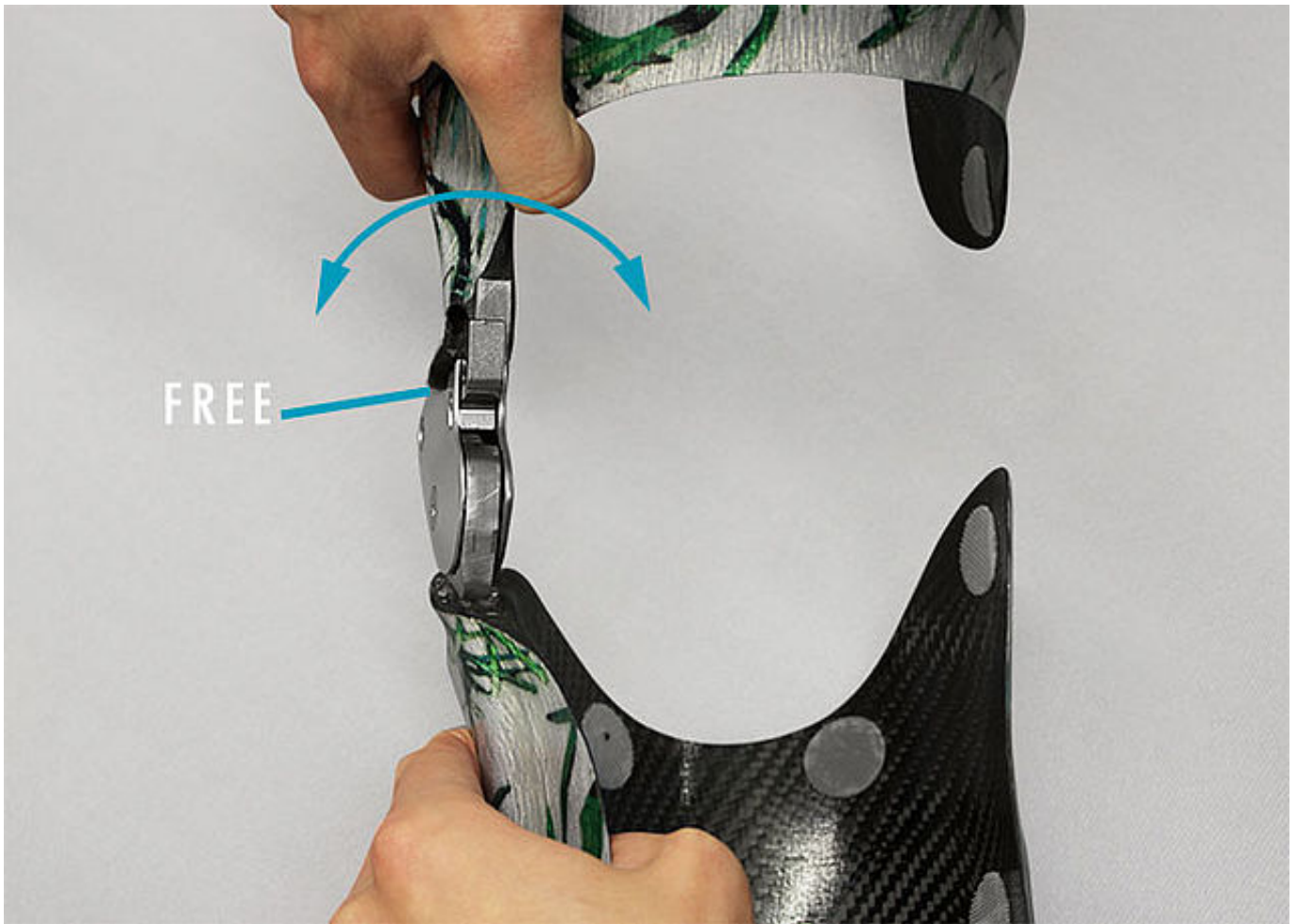

Verificare la presenza di un gioco laterale sull'articolazione modulare. In presenza di gioco, riavvitare le viti e/o sostituire i dischetti di slittamento usurati.

FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

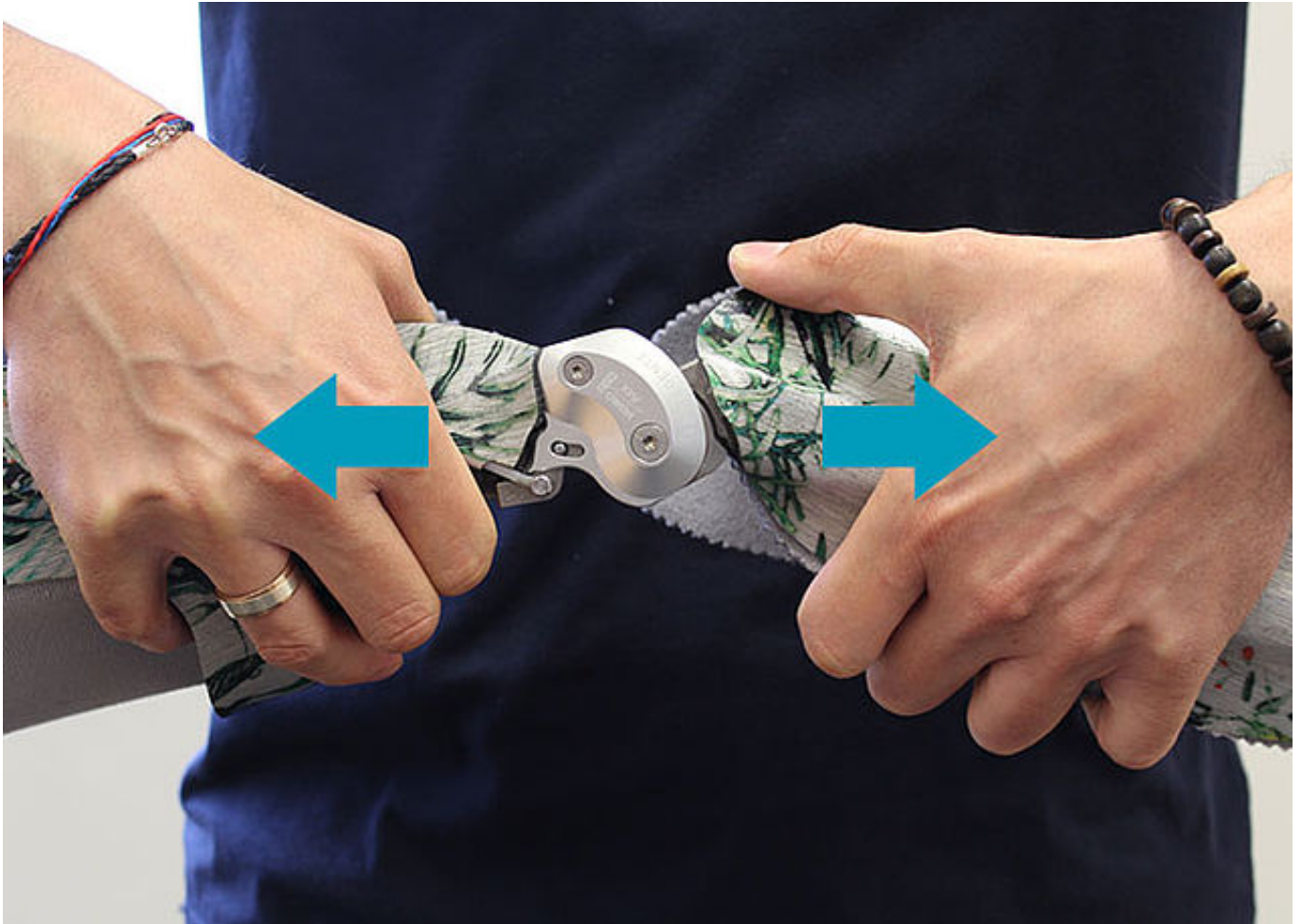

Verificare la presenza di un gioco intorno all'asse. In presenza di gioco, sostituire il dado testa ovale e la boccia scorrevole ed eventualmente inserirli.

FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

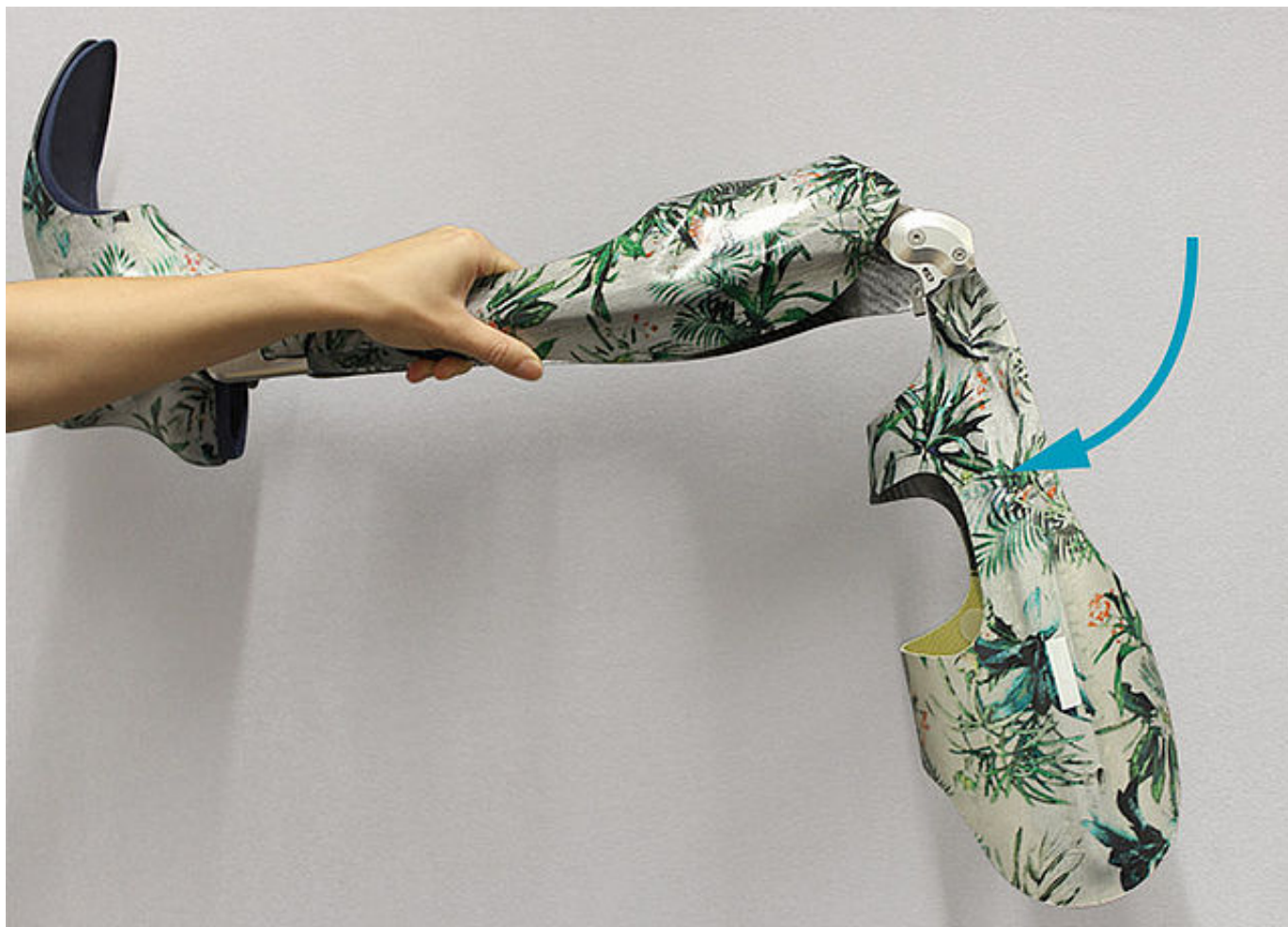

Verificare la facilità di movimento. Portare l'articolazione modulare in estensione. Verificare la flessione tenendo l'ortesi in posizione orizzontale e rilasciando la scocca per coscia. La scocca per coscia deve muoversi verso il basso senza difficoltà fino all'angolo di flessione massimo possibile.

Se l'articolazione si muove con difficoltà, inserire il dischetto di slittamento immediatamente più sottile.

Nota: in caso di ortesi bilaterale, verificare sempre solo un'articolazione modulare alla volta.

FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

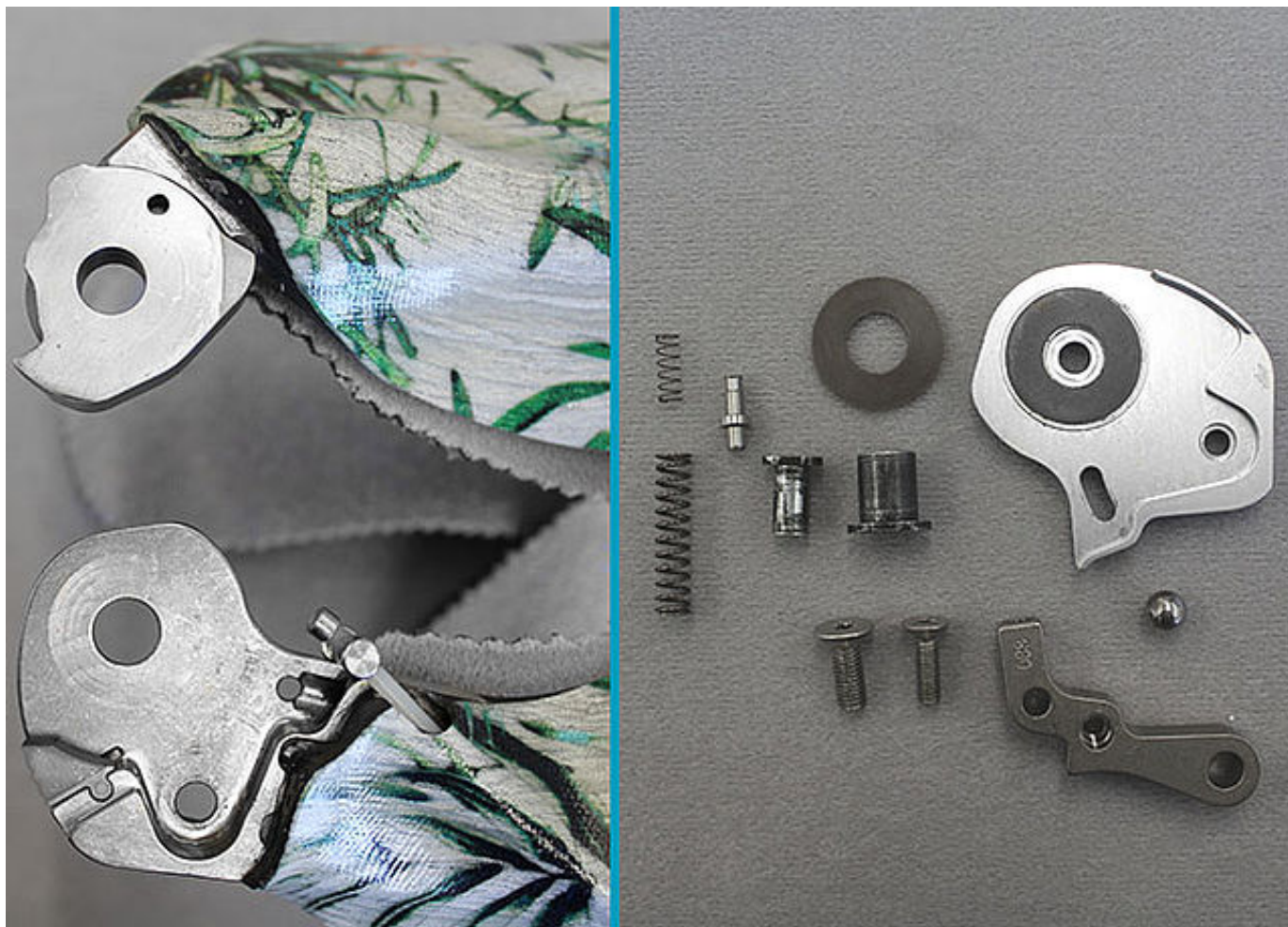

Smontare l'articolazione modulare completamente.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



Pulire tutti i componenti ed esaminare con cura lo stato di usura.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com





- dischetto di slittamento danneggiato
- dado testa ovale usurato
- vite usurata

Sostituire i componenti modulari danneggiati o usurati.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



- dentatura usurata

Il nottolino con denti di arresto e il disco con denti di arresto devono essere sostituiti sempre insieme.

FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

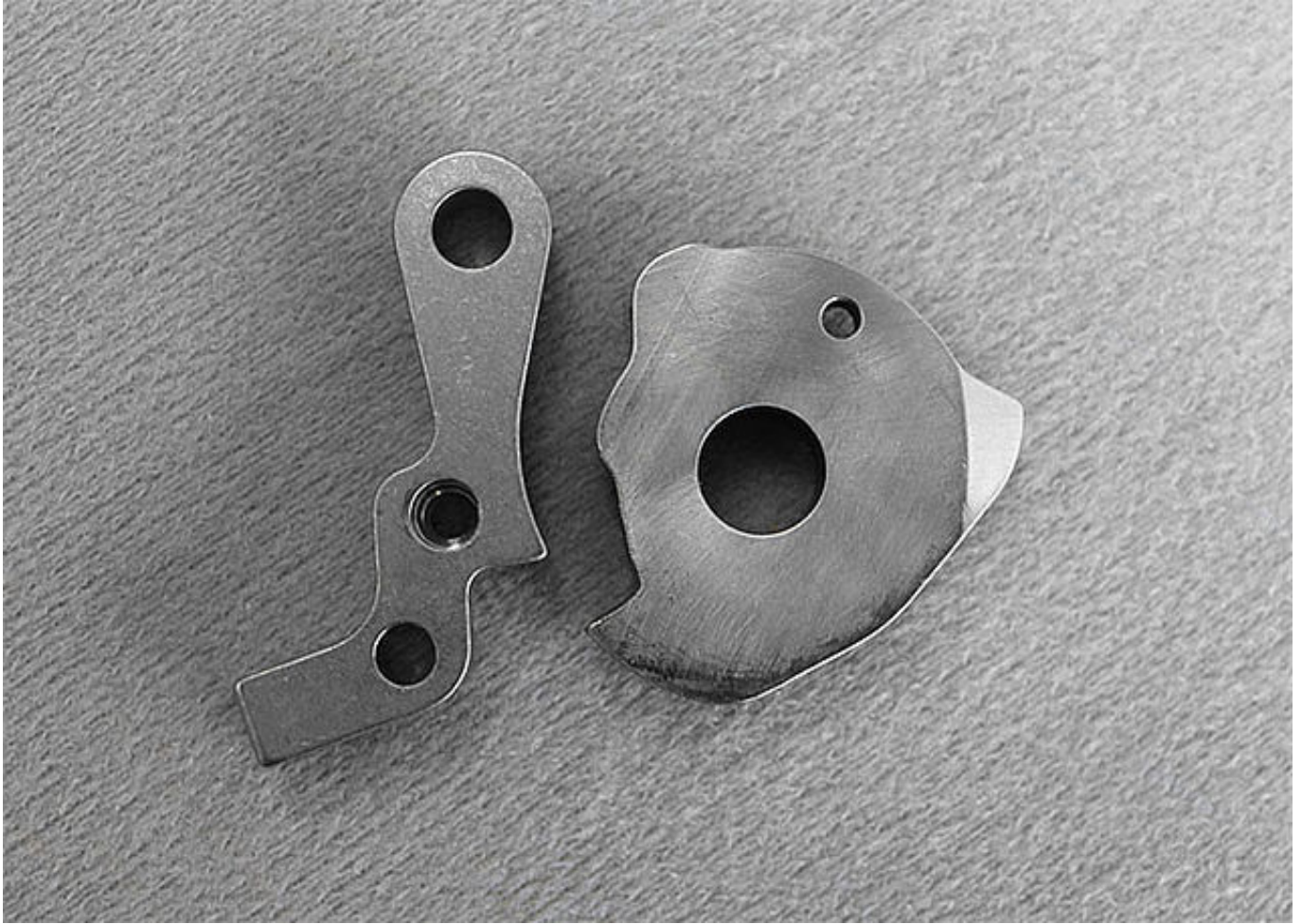

- componenti di blocco usurati

In presenza di gioco, sostituire il nottolino di arresto con quello più lungo (vedere le [istruzioni per l'uso](#)).

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



Per rimontare l'articolazione modulare, osservare il tutorial online per il [montaggio delle articolazioni](#) per ginocchio modulari con blocco movimento.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com



FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

