

Sostituzione delle linguette di aggiustamento

Alcune delle nostre articolazioni tibiotarsiche modulari sono dotate delle cosiddette linguette di aggiustamento con perno che si trovano nella parte superiore dell'articolazione. Di seguito viene descritto come procedere nel caso in cui sia necessario sostituire le linguette di aggiustamento con il perno a causa della manutenzione.

Maggiori informazioni relative alla durata di utilizzo dei nostri componenti modulari sono riportate nei [programmi della manutenzione](#).

FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com



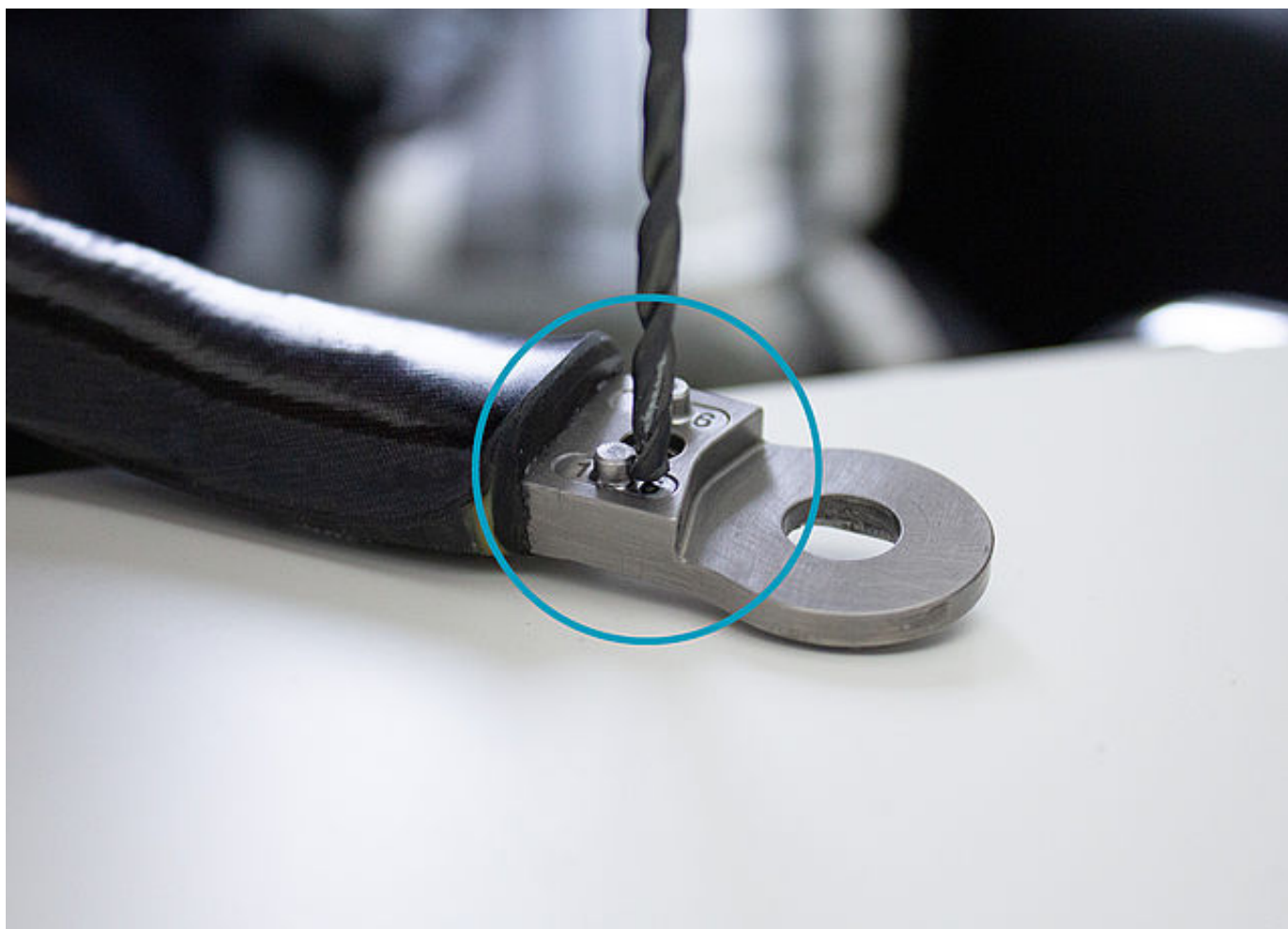


Rimuovere le linguette di aggiustamento con perno difettose forandole con cautela con un piccolo trapano.




Pulire accuratamente le scanalature sulla parte superiore dell'articolazione, altrimenti le linguette di aggiustamento con perno non possono essere montate correttamente. Si tratta di un aspetto importante, poiché le linguette di aggiustamento con perno montate in modo errato sono molto difficili da rimuovere.




Inserire entrambe le linguette di aggiustamento con perno nei fori svasati della dima per montaggio/colata.

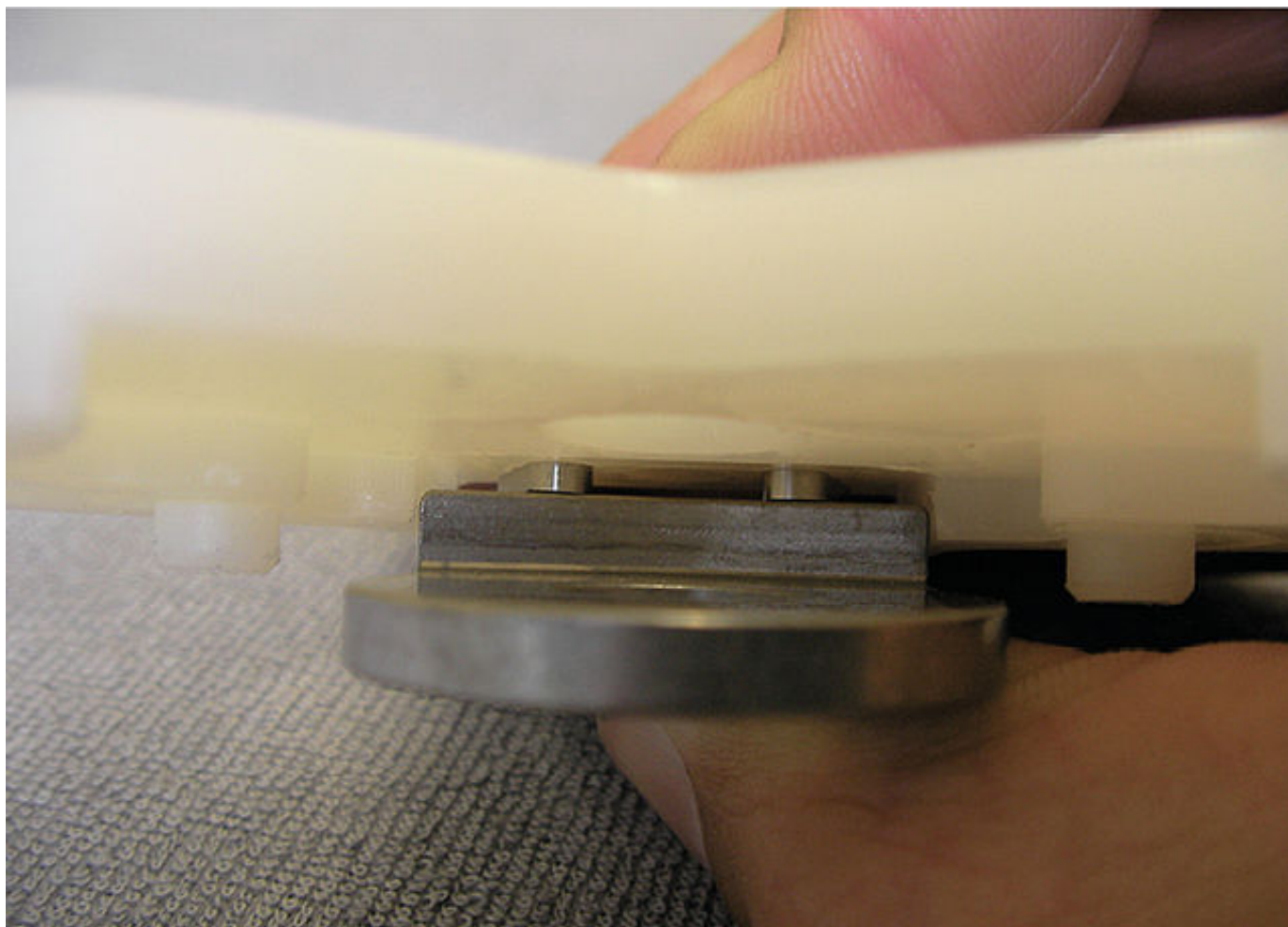

Posizionare la dima per montaggio/colata sulla parte superiore dell'articolazione in modo tale che le linguette di aggiustamento con perno siano inserite nelle scanalature.

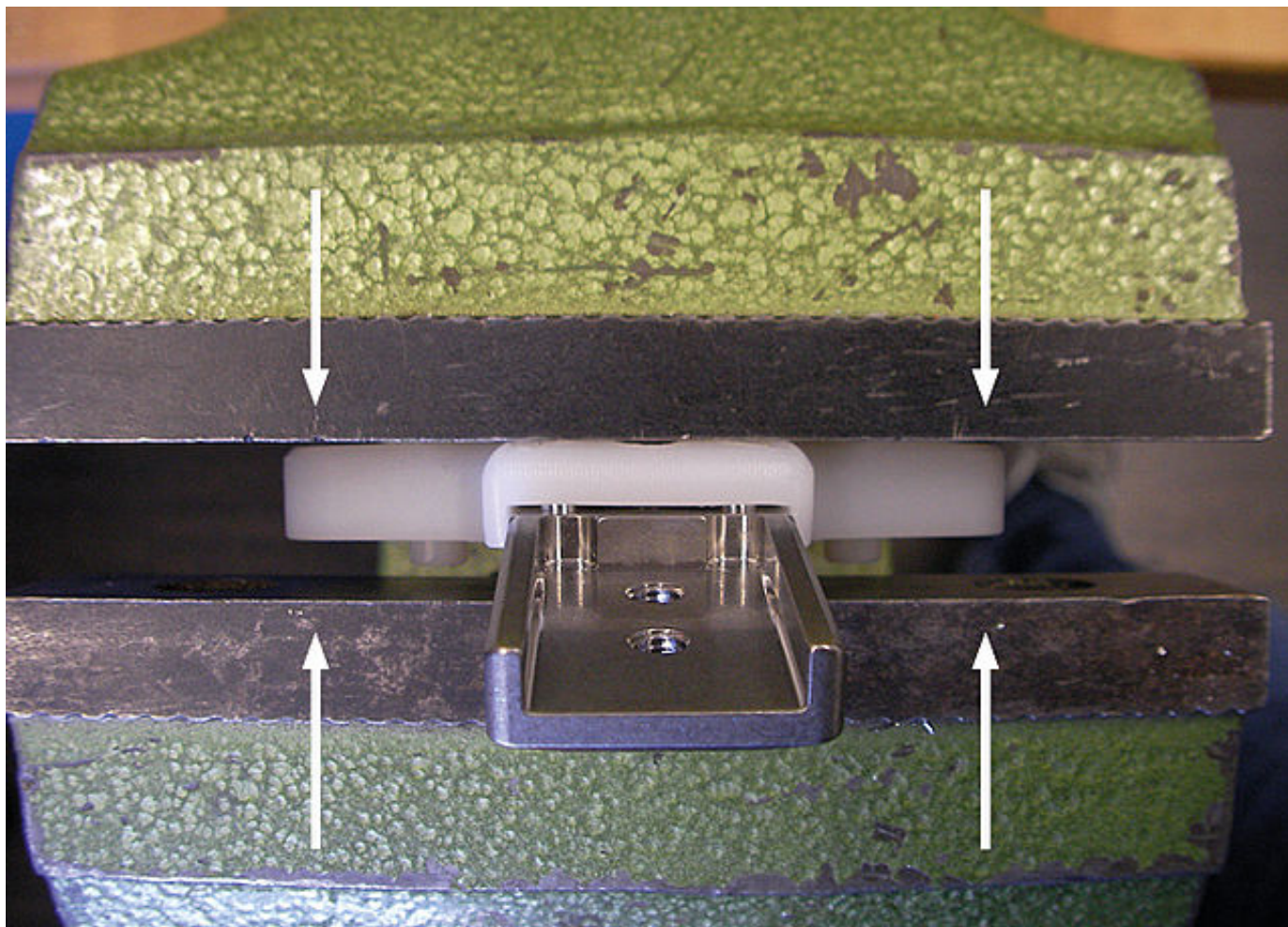

Premere la dima per montaggio/colata e la parte superiore dell'articolazione in una morsa da banco con ganasce lisce fino a quando non c'è spazio tra i due componenti.

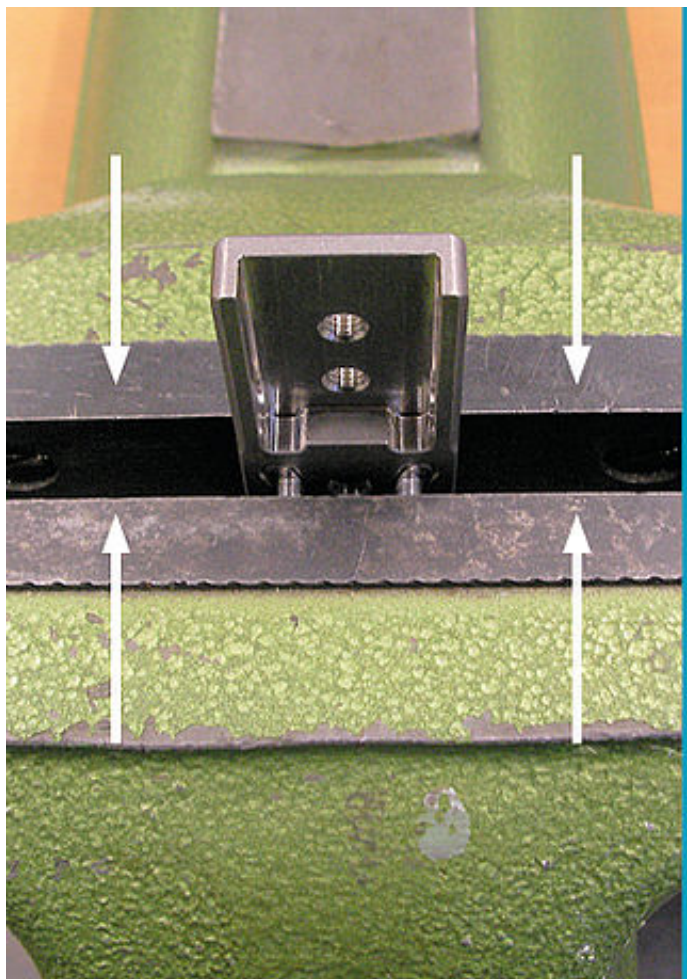

Rimuovere la dima per montaggio/colata. Premere la parte superiore dell'articolazione e le linguette di aggiustamento con perno in una morsa da banco con ganasce lisce fino a quando le linguette di aggiustamento con perno si chiudono a filo con la parte superiore dell'articolazione.



Montare la piastra di copertura sulla parte superiore dell'articolazione senza incollarla. Premere la parte superiore dell'articolazione e la piastra di copertura come descritto nelle presenti [istruzioni per l'uso](#).
Proseguire come di consueto con il montaggio dell'articolazione.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

Ultimo aggiornamento: 04/10/2022

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.com

