


Commissione del paziente/ID della configurazione _____

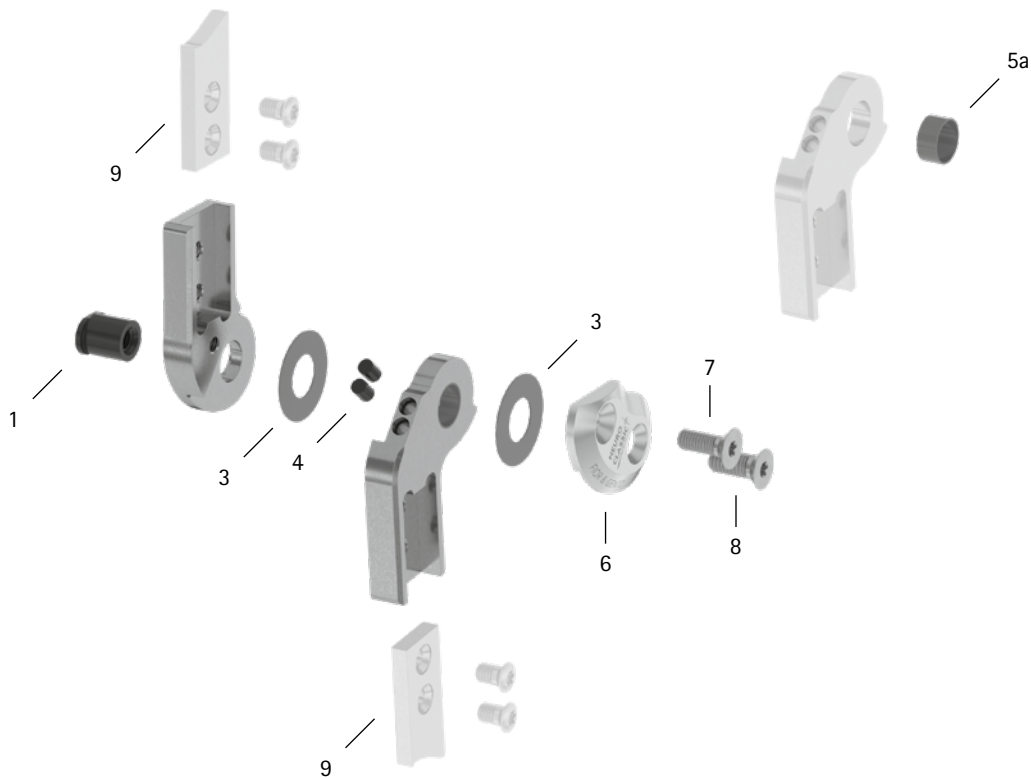

Pos.	20 mm	Descrizione	Possibile problema	Misura	Controllo raccomandato, event. sostituzione*	Sostituzione successiva dopo
Articolazione modulare						
1	SB1069-L1220	dado testa ovale	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
3	GS2611-040	dischetto di slittamento, Ø = 26 mm	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
3	GS2611-045					
3	GS2611-050					
3	GS2611-055					
3	GS2611-060					
4	PN1000-L05/5	ammortizzatore dell'arresto di estensione	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
5a	BP1211-L060	boccola scorrevole	usura	sostituire	ogni 6 mesi	18 mesi
6	SL0155-L/AL	piastra di copertura, sinistra laterale o destra mediale, alluminio	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
6	SL0155-R/AL	piastra di copertura, sinistra mediale o destra laterale, alluminio				
7	SC1405-L14	vite a testa svasata con cava esalobata	usura	sostituire	ogni 6 mesi	36 mesi
8	SC1406-L14	vite a testa svasata con cava esalobata (vite dell'asse)				
Ancoraggi modulari e stecche modulari						
9	vedere il catalogo	ancoraggi modulari e stecche modulari	usura o rottura	sostituire	ogni 6 mesi	secondo necessità

* in base alla valutazione del responsabile della commercializzazione del prodotto su misura in relazione al comportamento d'uso del paziente

WP0086-IT-2024-04