


NEURO CLASSIC-SPRING

Articolazione tibiotarsica modulare con
opzione di conversione alla modularità plug + go

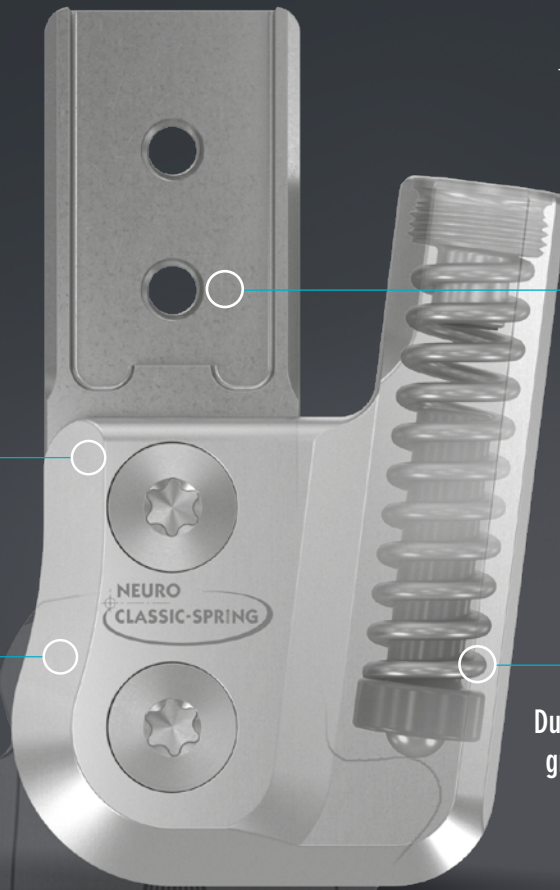

Migliore integrazione
nel laminato grazie
al canale della molla inclinato

Disponibile in acciaio e titanio

Convertibile in un'articolazione modulare
con modularità plug + go
mediante sostituzione
dell'unità funzionale e
limando la staffa per piede modulare

Durata di vita particolarmente lunga
grazie alla nuova costruzione delle
molle a compressione



Diritta



A gomito in alto,
verso l'interno



A gomito in alto,
verso l'esterno



10 mm



12 mm



14 mm



16 mm



20 mm


NEURO VARIO-SPRING 2

Articolazione tibiotarsica modulare con modularità plug + go

Le articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go dispongono di staffe per piede modulari, di parti superiori dell'articolazione e di dime per montaggio/colata identiche. Tutte le differenze funzionali risiedono nella piastra di copertura che può essere sostituita in modo semplice e veloce per eseguire una conversione tra le articolazioni modulari. Le articolazioni tibiotarsiche modulari con modularità plug + go includono tra le altre la NEURO VARIO 2, la NEURO VARIO-SWING e la NEURO SWING 2.

plug+go
MODULARITY

NEURO
VARIO-SPRING 2

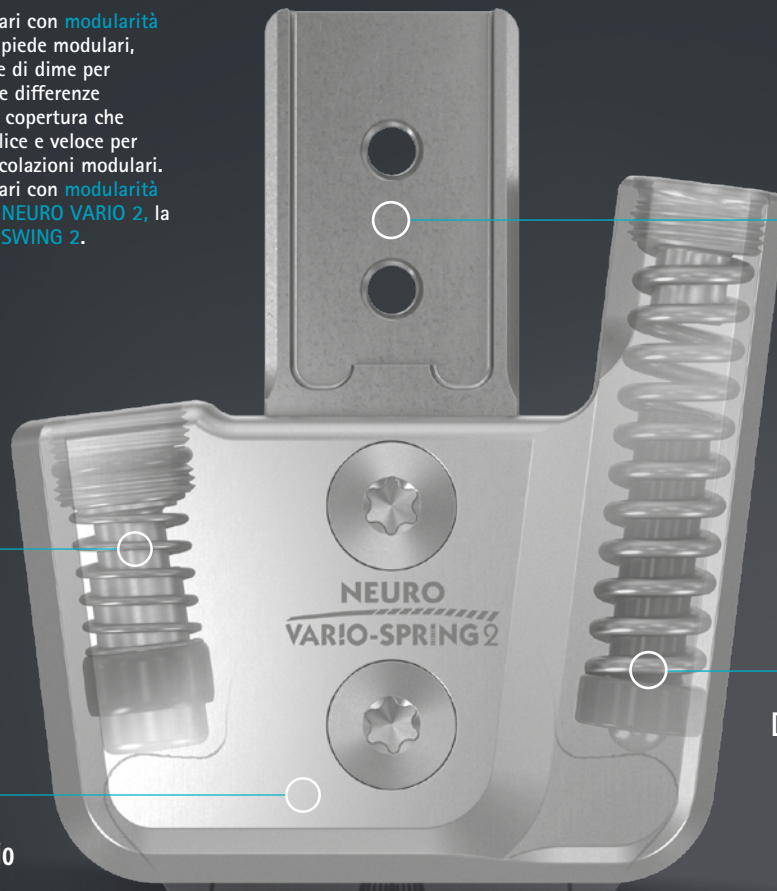

Migliore integrazione nel laminato grazie al canale della molla inclinato

Attenuazione dei rumori integrata

Durata di vita particolarmente lunga grazie alla nuova costruzione delle molle a compressione

Disponibile in acciaio e titanio



Diritta



A gomito in alto, verso l'interno



A gomito in alto, verso l'esterno



10 mm



12 mm



14 mm



16 mm



20 mm